



HISTOCOLD

Solución preservante para el transporte de unidades histológicas en condiciones de seguridad de la sala operatoria al laboratorio de anatomía patológica (conforme al Reglamento Europeo 605/2014)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	MEDIDAS
05-100200	Dispensador de solución Histocold (Dispensador + monitor + impresora)	1 un.	781 x 340 x 1230 mm
05-100205	Rollo de etiquetas para impresora HistoCold	1 un. (500 etiquetas)	55 x 110 mm



Producto sanitario-diagnóstico in vitro
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746

Basic UDI: 080341202W02079099EE
UDI-DI: 08034120273046



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fecha de publicación: 16/05/2022
Rev. 001

Dispensador de solución HistoCold

Dispensador frigorífico de pequeñas dimensiones para la dispensación de solución HistoCold. El instrumento está provisto de un pedal para un fácil uso. El bastidor del instrumento es de acero AISI 304. El dispensador HistoCold ofrece la posibilidad de suministrar el líquido por el grifo cuello de cisne, activable mediante un mando a pedal, para mayor higiene. El código 05-100200 incluye el monitor y la impresora.

Instrucciones de uso


1. Abra el tanque HistoCold quitando la tapa azul;
2. Atornille el tubo de aspiración del dispensador en el tanque HistoCold;
3. Presione el pedal para derramar la solución refrigerada.



Fecha de publicación: 16/05/2022
Rev. 001

Características técnicas

Medidas y peso	Medidas (L x P x H)	781 x 340 x 1230 mm
	Superficie de apoyo (L x P)	456 x 340 mm
	Peso	52 kg
Datos eléctricos	Voltaje	230 V
	Frecuencia	50 ÷ 60 Hz
	Consumo nominal	0,2 kW
Advertencias y precauciones	Clasificación del producto	El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de operadores sanitarios.
	Recomendaciones	En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano S.p.A. y a las autoridades competentes.

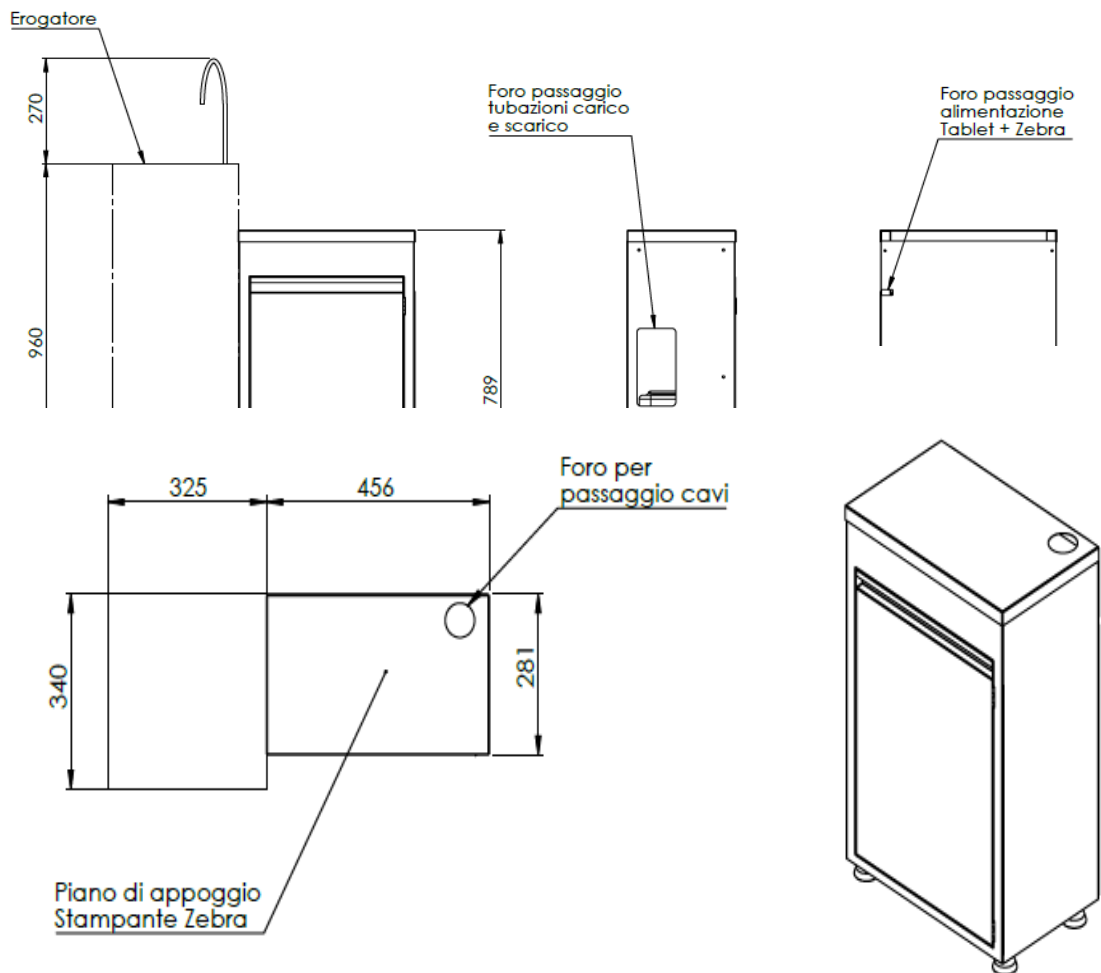

N°REVISIONE	MOTIVO	FECHA DE REVISIONE
001	Adeguación Reglamento UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Fecha de publicación: 16/05/2022

Rev. 001