

Accessori per archivi



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-5000-MDL	Molla distanziatrice per vetrini	4 pz.
03-C28N	Vaschetta per blocchetti e vetrini di dimensioni standard	1 pz.
03-C28S	Vaschetta per blocchetti e vetrini per macrosezioni	1 pz.



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Data di pubblicazione: 04/02/2019
Rev. 01

Accessori complementari per archivi di grandi dimensioni:

- Molla portavetrini
- Vaschette per vetrini.

CARATTERISTICHE MOLLA PORTAVETRINI




La molla portavetrini, in metallo, è appositamente realizzata per distanziare i vetrini ancora bagnati, evitando che gli stessi si incollino gli uni agli altri.

A seconda delle esigenze, la molla può essere utilizzata anche per separare i vetrini durante l'archiviazione definitiva degli stessi.

Ogni molla si incastra perfettamente in uno scomparto della vaschetta C28N. La confezione da 4 pz. consente di corredare una vaschetta C28N completa.

Ciascuna molla può contenere fino a un massimo di 48 vetrini. Ovviamente con l'utilizzo delle molle la capacità delle vaschette C28N e, più in generale dell'archivio, diminuisce significativamente.

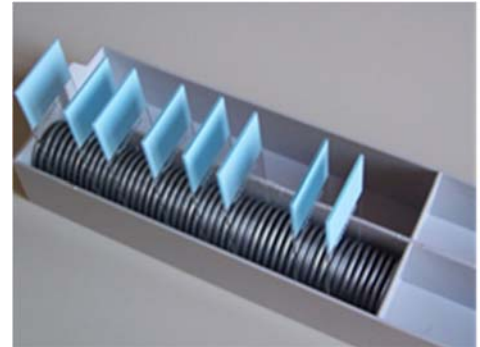

CARATTERISTICHE VASCHEE PER VETRINI



Le vaschette sono realizzate in materiale plastico antiurto, di colore grigio, per contenere i vetrini e i blocchetti all'interno degli archivi di grandi dimensioni. Sono dotate di due rilievi alle estremità per facilitarne la presa all'interno dell'archivio.

Sono disponibili in due modelli:

- *Vaschetta C28N*: vaschetta standard di dimensioni esterne 300 x 63,5 x 40 (h) mm.

Le vaschette modello C28N sono suddivise all'interno in quattro scomparti, ciascuno dei quali può contenere fino a 20 blocchetti (in totale 80 blocchetti per ogni vaschetta) o a 120 vetrini (in totale 480 vetrini per ogni vaschetta). All'interno di ogni scomparto può essere inserita una molla portavetrini: in questo caso la capacità si riduce a 48 vetrini (in totale 192 vetrini per ogni vaschetta dotata di 4 molle).

- *Vaschetta C28S*: appositamente studiata per l'archiviazione di blocchetti e vetrini per macrosezioni, priva di scomparti interni. Le dimensioni esterne sono le stesse della vaschetta C28N (300 x 63,5 x 40 (h) mm). Ciascuna vaschetta C28S può contenere 9/10 blocchetti per macrosezioni o 240 vetrini, sempre per macrosezioni.

Data di pubblicazione: 04/02/2019

Rev. 01

Specifiche

Dati tecnici molla	Materiale	Acciaio
	Dimensioni (l x Ø)	(150 x 25) mm
Dati tecnici vaschetta	Materiale	Polistirolo
	Dimensioni (l x p x h)	(300 x 63,5 x 40) mm
Packaging	Contenitore primario	Sacchetto in cellophane
	Etichetta	Etichetta adesiva cartacea presente sulla confezione esterna
	Contenitore secondario	Non presente
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Temperatura di stoccaggio	Non sono previste particolari limitazioni.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non sono necessarie precauzioni particolari per il corretto utilizzo del prodotto.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso.
	Smaltimento	Dopo l'utilizzo, conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.

Data di pubblicazione: 04/02/2019

Rev. 01