

Accesorios para archivadores



CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE
03-5000-MDL	Muelle separador	4 pcs
03-C28N	Cubeta para casetes y laminas	1 pcs
03-C28S	Cubeta para mega laminas y supermegacasetes	1 pcs



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Publicación: 17/03/2020
Rev. 02


Accesorios para archivadores de grandes dimensiones:

- Muelle separador;
- Cubetas para laminas y casetes.

MUELLE SEPARADOR



Muelle portaobjetos metálico, expresamente realizado para separarlos portaobjetos todavía húmedos, evitando que los mismos se peguen entre si. Cada muelle tiene una longitud de 15 cm y un diámetro de 2,5 cm y encaja perfectamente en un compartimiento de la cubeta C28. Cada muelle puede contener hasta a un máximo de 48 portaobjetos

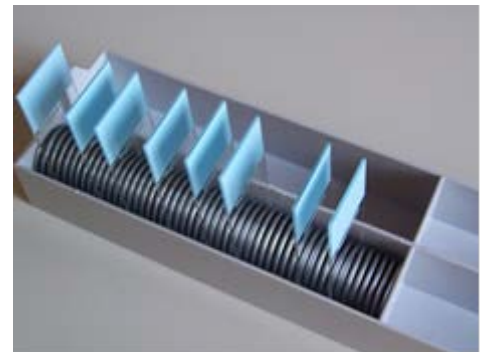

CUBETAS



Las cubetas están hechas de plástico, de color gris, para contener los portaobjetos y las casetes dentro de los archivadores grandes. Están disponibles en dos modelos:

- Cubeta C28N: cubeta estándar de dimensiones exteriores 30 x 6, 2 x 4 (a) cm.

Las cubetas modelo C28N están subdivididas interiormente en cuatro compartimientos, y cada uno puede contener hasta 20 casetes (en total 80 casetes para cada cubeta) o 120 portaobjetos (en total 480 portaobjetos para cada cubeta). En cada compartimiento encaja un muelle portaobjetos: en este caso la capacidad se reduce a 48 portaobjetos (en total 192 portaobjetos para cada cubeta que lleva 4 muelles).

- Cubeta C28S: expresamente estudiada para el archivo de casetes y portaobjetos para macrosecciones, sin compartimientos internos. Las dimensiones exteriores son las mismas de la cubeta C28N (30 x 6, 2 x 4 (a) cm). Cada cubeta C28S puede contener 9/10 casetes para macrosecciones o 240 portaobjetos, siempre para macrosecciones.

Publicación: 17/03/2020

Rev. 02

Características técnicas

Muelle	Material	Acero
	Dimensiones (l x Ø)	(150 x 25) mm
Cubeta	Material	Polystyreno
	Dimensiones (l x d x h)	(300 x 63,5 x 40) mm
Envase	Envase primario	Bolsa de celofán
	Etiqueta	Etiqueta adhesiva en el embalaje externo
	Envase secundario	No presente
Almacenamiento	Almacenamiento	Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales de conservación y almacenamiento.
Avertencias	Clasificación del producto	El producto está destinado al uso de personal técnico especializado. El producto no está clasificado como peligroso.
	Forma de eliminación	Eliminar según las leyes vigentes.

Publicación: 17/03/2020

Rev. 02