


SUPERMEGACASSETTE PER INCLUSIONE



CODICE	COLORE	CONFEZIONAMENTO	NUMERO DI REPERTORIO
07-7000	Bianco	200 pz. (3 dispenser: 2 da 100 pz. di cassette e 1 da 200 pz. di coperchi)	1641256/R

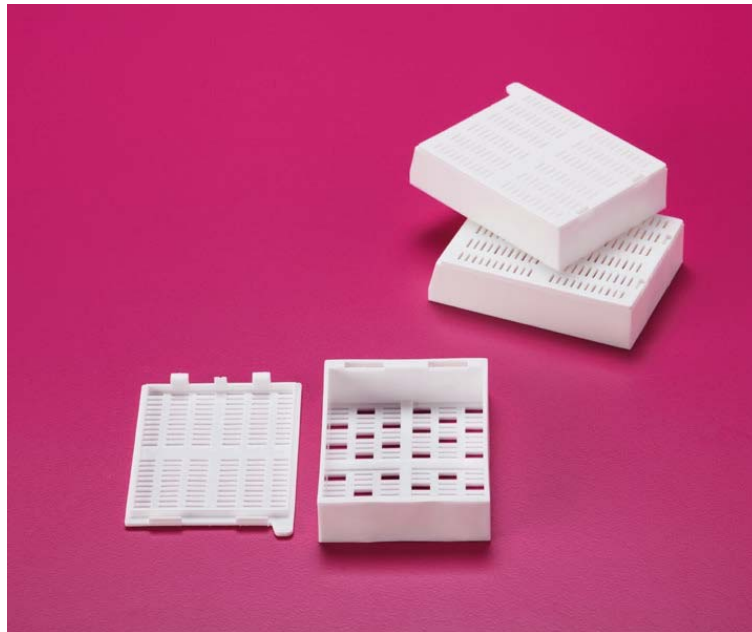

Dispositivo medico – diagnostico in vitro
Codice CND: W05030501



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)



Prodotto monouso

Data di pubblicazione: 04/02/2019
Rev. 01

Cassette per inclusione di macrosezioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassette per inclusioni istologiche di macrosezioni di campioni istologici, dotate di un doppio sistema di chiusura che garantisce una perfetta tenuta durante la processazione.

L'identificazione del contenuto è agevolata da superfici rugose presenti su tre lati della cassetta, adatte alla scrittura con matite o con penne per istologia (codice 11-50).

Rispetto alle tradizionali cassette per macrosezioni, le SuperMegaCassette Bio-Optica hanno alcuni fori di dimensioni maggiori. Questo permette alla paraffina di fare più presa, durante la fase di inclusione, in modo da evitare rotture accidentali del blocchetto durante il taglio al microtomo.

Le SuperMegaCassette sono prodotte al meglio delle nostre competenze tecniche, pertanto, a causa della complessità delle Biocassette stesse e della tipologia di materiale impiegato, è da considerarsi fisiologica una quantità di cassette difettose pari a 5.000 PPM (Parti Per Milione), corrispondente ad una percentuale dello 0.5%.

Entro questa quantità non si accettano reclami e/o richieste di sostituzione in garanzia.

Specifiche tecniche	Composizione chimica	Resina acetalica (Poliossimetilene Poliacetale). Le resine acetaliche possiedono un'ottima stabilità alle alte temperature, ai trattamenti al microonde, ai solventi, agli acidi e alle basi; il materiale è quindi ottimale per la processazione e l'inclusione di pezzi in paraffina.
	Dimensioni interne	62 x 48 x 14 mm
	Dimensioni esterne	73 x 53 x 16 mm
Packaging	Contenitore primario	Dispenser in cartone resistente, provvisti di apertura frontale per facilitare l'estrazione delle cassette.
	Contenitore secondario	Scatola di cartone.
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo, dopo la prima apertura.
	Validità	Non applicabile a questa tipologia di prodotto.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non previste per questo tipo di prodotto.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso dal punto di vista chimico.
	Smaltimento	Da smaltire secondo le normative vigenti.

Data di pubblicazione: 04/02/2019

Rev. 01